

Geachte Collega,

Het laboratorium LBS streeft steeds naar het verbeteren van de kwaliteit en doeltreffendheid. Daarom beperken wij het gebruik van de wisser voor microbiologische en moleculair-biologische afnames tot twee types.

Graag melden wij u ook dat het labo vanaf **midden februari 2017** van start gaat met **een nieuwe moleculair-biologische techniek, gebaseerd op de amplificatie van nucleïnezuren (NAAT; "nucleic acid amplification test")**. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Herpes simplex* type 1 en 2, *Mycoplasma genitalium* en *Trichomonas vaginalis* op te sporen, gebruik makend van slechts één staalname. Deze techniek zorgt voor een verbeterde screening, met snellere antwoordtijd.

### **ESwab met ROZE dop** *(transparent transportmilieu) wordt gebruikt voor:*

- Bacteriologische culturen (aëroob en anaëroob).
- Gistcultuur.
- Opsporen van *Mycoplasma hominis* en *Ureaplasma urealyticum* d.m.v. cultuur.
- Opsporen van Strepto A antigeen, en Influenza A/B antigeen.
- Opsporen van *Chlamydia trachomatis* en/of gonokokken d.m.v. NAAT\*.
- Opsporen van *Mycoplasma genitalium* d.m.v. NAAT\*.
- Opsporen van *Herpes simplex* type 1 en 2 d.m.v. NAAT\*.
- Opsoren van *Trichomonas vaginalis* d.m.v. microscopie en NAAT\*.

\*NAAT: terugbetaling RIZIV onder specifieke voorwaarden, zoniet wordt €30 gefactureerd aan de patiënt.

### **ESwab met ORANJE dop** *(fijne wisser, transparent transportmilieu) voor:*

- Externe gehoorgang, urethrale en naso-faryngeale afnames.
- Dezelfde testen als op ESwab met roze dop.

Ter info: Het opsporen van *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Mycoplasma genitalium* en *Trichomonas vaginalis* kan ook op een eerste ochtend urinestaal (validatie voor *Mycoplasma genitalium* en *Trichomonas vaginalis* is lopende).

Wij staan steeds ter uwer beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Collegialiter,  
De biologen van het labo LBS

WISSERS VOOR BACTERIOLOGISCHE AFNAMES  
EN NIEUWE MOLECULAIR-BIOLOGISCHE TECHNIEK  
VOOR DETECTIE VAN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE  
AANDOENINGEN


## ESwab

### In de kit:



^  
Swab met breekpunt  
(rood streepje)

Tube met roze dop >

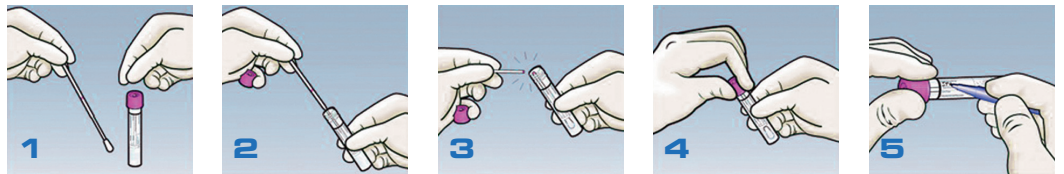

1. Neem de swab uit de kit en voer de afname uit
2. Schroef de dop van het buisje en steek de wisser er in
3. Breek de wissersteel af aan het breekpunt (rode streep)
4. Draai de dop goed op de tube, zodat deze goed gesloten is
5. Noteer de patiëntengegevens en staalorigine op het buisje

Het gebruik van de ESwab met oranje dop is identiek.



### L.B.S.

Alsembergsesteenweg 196  
B-1190 Brussel  
Tel. +32 2 349 67 11  
Fax +32 2 346 11 51  
info@lbslab.be - www.lbslab.be  
Erkenningsnummer 8-28620-51-998

Maatschappelijke zetel  
Cerba HealthCare Belgium bv bvba  
Joseph Wybranlaan 45A  
B-1070 Brussel  
BE 0419.540.638